

Deze gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de volgende artikelen:

TOP Line					
REF	70100	70101	70102	70103	70104
Maat	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Afmetingen	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Verpakkingseenheid	100 stuks	100 stuks	300 stuks	100 stuks	100 stuks

Trend Line					
REF	70400	70401	70402	70403	70404
Maat	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Afmetingen	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Verpakkingseenheid	100 stuks	100 stuks	300 stuks	100 stuks	100 stuks

Standard Line					
REF	70100A	70101A	70102A	70103A	70104A
Maat	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Afmetingen	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Verpakkingseenheid	100 stuks	100 stuks	300 stuks	100 stuks	100 stuks

TAB Line					
REF	70500	70501	70502	70503	70504
Maat	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Afmetingen	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Verpakkingseenheid	100 stuks	100 stuks	300 stuks	100 stuks	100 stuks

Plus Line				
REF	70600	70601	70602	70603
Maat	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -
Afmetingen	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm
Verpakkingseenheid	100 stuks	100 stuks	300 stuks	100 stuks

- 1 Klap het lipje naar voren
- 2 Plaats de fosforplaat in de beschermkap
- 3 Trek de witte strook eraf
- 4 Klap het lipje terug en druk het stevig aan
- 5 De inactieve zijde moet naar het röntgenapparaat wijzen
- 6 Om de beschermende envelop te openen, verwijdert u de bovenste of onderste strook
- 7 Na gebruik op de juiste manier weggooien

REF	NPRHB0, NPRHB1, NPRHB2, NPRHB3, NPRHB5	706310, 706311, 706312
	QWU000, QWU001, QWU002, QWU003, QWU004	7302, 7303, 7304, 7305, 7306
	209635, 209636, 209637, 209638, 209639, 235952, 235953	88200, 88201, 88202, 88203, 88204
	322955, 322960, 351990, 351995, 353785, 353790	960002, 960003, 960004, 960005
	6074301, 6074302, 6074303, 6074308, 6074312	

Beoogd doeleind

De beschermhoezen voor de imaging plat zijn kunststof hoezen voor eenmalig gebruik, bedoeld om de patiënt te beschermen tegen besmetting van deeltjes van de imaging plate, om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen en om de intraorale imaging plates bij digitale tandheelkundige röntgenfoto's te beschermen (tegen licht, stof, vuil, fysieke schade). De beschermhoezen zijn verkrijgbaar in 5 maten (0, 1, 2, 3, 4) en zijn compatibel met de meest courante maten van beeldvormingsplaten op de markt.

Prestatiegegevens

De beschermhoezen zijn gemaakt van latexvrije, reukloze kunststof en het materiaal is getest op mogelijke huidintolerantie.







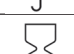



De beschermhoezen kunnen worden gebruikt tijdens de beeldvorming, de opslag en het scannen om een goede beeldkwaliteit te garanderen en de levensduur van de beeldvormingsplaten te verlengen.

De beschermhoezen voor eenmalig gebruik is bedoeld ter ondersteuning van maatregelen voor tandhygiëne, maar vervangt niet de specificaties van de fabrikant voor desinfectie of sterilisatie van de herbruikbare intraorale beeldvormingsplaten.

Opmerkingen over het veilig gebruik van het product*

- Het medisch hulpmiddel mag alleen worden gebruikt door (opgeleid) tandheelkundig personeel.
- De beschermhoezen van de imaging plate mogen alleen worden gebruikt met nieuwe wegwerphandschoenen, zodat kruisbesmetting wordt voorkomen.
- Gebruik een nieuwe beschermhoezen elke keer dat u de imaging plate gebruikt.
- Gebruik alleen beschermhoezen (maat 0, 1, 2, 3, 4) die op de beeldvormingsplaten passen.
- Beschermhoezen zijn wegwerpbaar en mogen in geen geval opnieuw worden gebruikt. Bij veelvuldig gebruik kan kruisbesmetting tussen patiënten optreden, wat tot infectie kan leiden.
- Gooi de beschermhoezen weg na ieder gebruik.
- Gebruik nooit een beschadigde beschermhoezen.
- Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen zoals aangegeven op de illustraties aan de ommezijde. De ergonomisch ontworpen beschermhoezen en het zelfklevende lipje met stevige kartonnen afdekstrips maken het mogelijk de beeldvormingsplaat gemakkelijk te openen en eenvoudig in te brengen.

Alle ernstige incidenten in verband met het product moeten worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van uw land.

Verklarende tekst voor symbolen die vaak op de verpakkingen en etiketten van medische hulpmiddelen van MGK worden gebruikt volgens EU-norm voor medische hulpmiddelen DIN EN ISO 15223-1:2017-04			
	Gebruiksaanwijzing raadplegen	REF	Catalogus- of modelnummer
	Niet opnieuw gebruiken	LOT	Batchcode
	Niet-steriel	MD	Medisch hulpmiddel
	Uit het zonlicht houden	UDI	Unieke code voor hulpmiddelidentificatie
	Droog houden		Aantal dozen in verpakkingseenheid
	Uiterste gebruiksdatum		Aantal beschermhoezen per doos
	Temperatuurlimiet	CE	CE-conformiteitsmarkering
	Fabrikant		

*Literatuur: ¹⁾Infectiönprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene1 - Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2006, 49, S1-16, <http://www.bonath-dental.com/RKI-Zahnmedizin2006.pdf>
²⁾Hygienestandard der Zahnarztpraxen in Greifswald nach Publikation der RKI-Richtlinie 2006 im Vergleich zum Hygienestandard in Greifswald und Magdeburg, S. Handrup - 2011

