










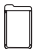


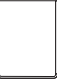











Tento návod k použití se vztahuje k následujícím článkům:


TOP Line					
REF	70100	70101	70102	70103	70104
Velikost	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Rozměry	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Balící jednotka	100 kusy	100 kusy	300 kusy	100 kusy	100 kusy

Trend Line					
REF	70400	70401	70402	70403	70404
Velikost	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Rozměry	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Balící jednotka	100 kusy	100 kusy	300 kusy	100 kusy	100 kusy

Standard Line					
REF	70100A	70101A	70102A	70103A	70104A
Velikost	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Rozměry	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Balící jednotka	100 kusy	100 kusy	300 kusy	100 kusy	100 kusy

TAB Line					
REF	70500	70501	70502	70503	70504
Velikost	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Rozměry	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Balící jednotka	100 kusy	100 kusy	300 kusy	100 kusy	100 kusy

Plus Line				
REF	70600	70601	70602	70603
Velikost	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -
Rozměry	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm
Balící jednotka	100 kusy	100 kusy	300 kusy	100 kusy

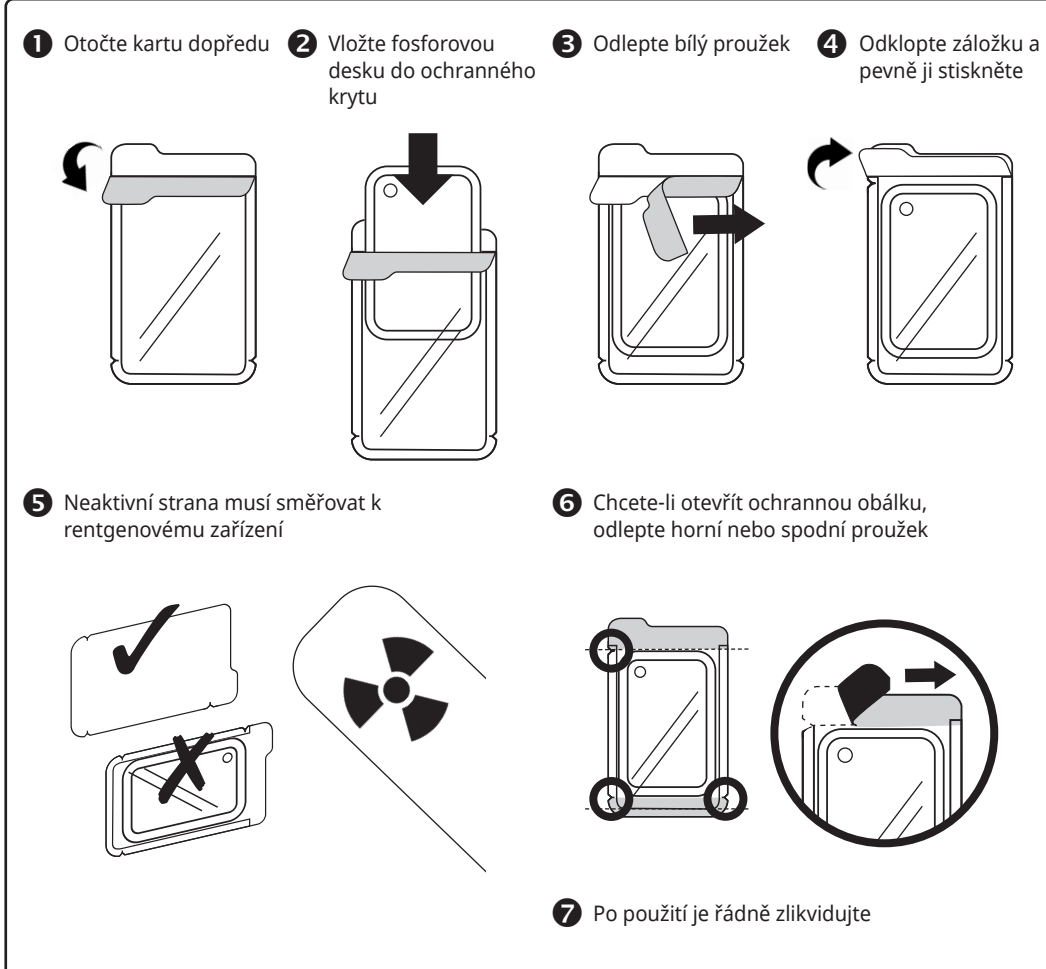

- Otočte kartu dopředu
- Vložte fosforovou desku do ochranného krytu
- Odepte bílý proužek
- Odklopte záložku a pevně ji stiskněte
- Neaktivní strana musí směřovat k rentgenovému zařízení
- Chcete-li otevřít ochrannou obálku, odlepte horní nebo spodní proužek
- Po použití je řádně zlikvidujte

REF	NPRHB0, NPRHB1, NPRHB2, NPRHB3, NPRHB5 QWU000, QWU001, QWU002, QWU003, QWU004 209635, 209636, 209637, 209638, 209639, 235952, 235953 322955, 322960, 351990, 351995, 353785, 353790 6074301, 6074302, 6074303, 6074308, 6074312	706310, 706311, 706312 7302, 7303, 7304, 7305, 7306 88200, 88201, 88202, 88203, 88204 960002, 960003, 960004, 960005
-----	---	---

Určeným účelem

Ochranná pouzdra zobrazovacích desek jsou jednorázová plastová pouzdra určená k ochraně pacienta před kontaminací částicemi zobrazovací desky, k zabránění křížové kontaminace mezi pacienty a k ochraně (světlo, prach, nečistoty, fyzické poškození) intraorálních zobrazovacích desek při digitálních zubních rentgenových snímcích. Ochranná pouzdra jsou k dispozici v 5 velikostech (0, 1, 2, 3, 4) a jsou kompatibilní s nejběžnějšími velikostmi zobrazovacích desek na trhu.

Údaje o výkonu

Ochranné návleky jsou vyrobeny z bezlatexového plastu bez zápachu a materiál byl testován na možnou kožní nesnášenlivost.

Ochranná pouzdra lze použít při zobrazování, skladování a skenování, aby byla zajištěna dobrá kvalita obrazu a prodloužena životnost zobrazovacích desek.

Jednorázové ochranné pouzdro je určeno k podpoře opatření dentální hygieny, ale nenahrazuje specifikace výrobce pro dezinfekci nebo sterilizaci opakovaně použitelných intraorálních zobrazovacích desek.

Poznámky k bezpečnému používání výrobku*

- Zdravotnický prostředek smí používat pouze (vyškolený) zubní personál.
- Ochranné návleky na zobrazovací desky by se měly používat pouze s novými jednorázovými rukavicemi, aby se zabránilo křížové kontaminaci.
- Při každém použití zobrazovací desky použijte nové ochranné pouzdro.
- Používejte pouze ochranná pouzdra (velikost 0, 1, 2, 3, 4), která jsou vhodná pro zobrazovací desky.
- Ochranné návleky jsou na jedno použití a v žádném případě se nesmí používat opakovaně. Při vícenásobném použití může dojít ke křížové kontaminaci mezi pacienty, což může vést k infekci.
- Po každém pacientovi/použití zlikvidujte ochranné pouzdro.
- Nikdy nepoužívejte poškozené ochranné pouzdro.
- Snadná aplikace a odstranění podle obrázků na druhé straně. Ergonomicky navržená ochranná pouzdra a samolepicí záložka s pevnými kartonovými krycími lištami umožňují snadné otevření a jednoduché vložení zobrazovací desky.

Všechny závažné události, ke kterým dojde v souvislosti s výrobkem, musí být nahlášeny výrobci a příslušnému orgánu vaší země.

Slovníček symbolů – význam symbolů na obalech a etiketách podle nařízení EU o zdravotnických prostředcích (MDR) DIN EN ISO 15223-1:2017-04

	Seznamte se s návodem k použití	REF	Katalogové číslo
	Nepoužívejte opakovaně	LOT	Číslo šarže
	Nesterilní	MD	Zdravotnických prostředcích
	Chraňte před slunečním světlem	UDI	Jedinečným identifikátorem prostředku
	Uchovávejte v suchu		Počet krabic v obalové jednotce
	Doba použitelnost		Počet ochranných pouzder na obrazové desky v krabici
	Teplotní limit	CE	Označením shody CE
	Výrobce		

*Literatura: ¹⁾Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene1 - Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2006, 49, S1-16, <http://www.bonath-dental.com/RKI-Zahnmedizin2006.pdf>
²⁾Hygienestandard der Zahnarztpraxen in Greifswald nach Publikation der RKI-Richtlinie 2006 im Vergleich zum Hygienestandard in Greifswald und Magdeburg, S. Handrup - 2011

