


KaVo QUATTROcare PLUS

# Gute Pflege zahlt sich aus.

Die günstige Lösung für optimale Pflege  
und langfristige Werterhaltung.

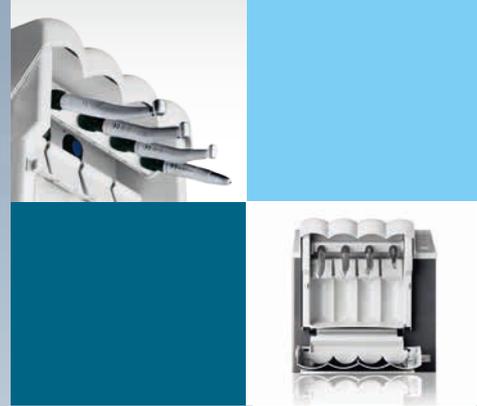

KaVo. Dental Excellence.

# Vierfach perfekte Pflege. Schnell und komfortabel.

## So einfach in der Anwendung.

Im Praxisalltag bleibt wenig Zeit für die Pflege Ihrer hochqualitativen Instrumente. Weder für Sie noch für Ihr Praxisteam. Es ist daher umso wichtiger, auf ein durchdachtes Pflegesystem vertrauen zu können, das intuitiv und schnell zu bedienen ist. Instrumente aufstecken. Frontklappe schließen. Starten. Vier auf einmal. Im Handumdrehen fertig.

## Vier Instrumente in einer Minute.

Einfach per Knopfdruck. Einfach vollautomatisch. KaVo QUATTROcare PLUS bietet ein Höchstmaß an Schnelligkeit und Bedienerfreundlichkeit. Dabei besticht KaVo QUATTROcare PLUS durch einfachste Handhabung. Sie stecken bis zu vier Instrumente gleichzeitig auf die vier Pflegekupplungen, schließen die Frontklappe und starten das Pflegeprogramm. Der komplette Pflegevorgang für vier Instrumente dauert nur 1 Minute. Danach ist das QUATTROcare PLUS sofort wieder für den nächsten Pflegezyklus betriebsbereit.

## So einfach geht's.

Optimale Pflegequalität für vier Instrumente:

Die Arbeitsschritte mit KaVo QUATTROcare PLUS.

- 1 Instrumente aufstecken. Zum Aufstecken der Instrumente stehen Ihnen standardmäßig eine MULTIflex-Pflegekupplung sowie drei INTRAmatic-Kupplungen zur Verfügung.
- 2 Frontklappe schließen. Und schon kann es losgehen.
- 3 Startknopf drücken. Die vollautomatische Innenreinigung und Pflege von bis zu vier Instrumenten dauert nur 1 Minute.
- 4 Fertig. Instrumente entnehmen.



**NUR 1  
MIN!**

## Handhabung und Programmablauf – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Keine Bedienungsfehler dank einfacher und sicherer Handhabung
- Pflegesicherheit durch automatischen Programmablauf
- Wiederverfügbarkeit der Instrumente dank kurzer Zyklusdauer schon nach einer Minute

**KaVo QUATTROcare PLUS:**  
einfach – schnell – komfortabel.



# Optimale Pflege.

## Der Unterschied liegt im Detail.

Durch das Aufschäumen der Reinigungskomponente des KaVo QUATTROcare plus Pflegesprays werden die anorganischen Rückstände im Innern der Instrumente gelöst, per Druckluft ausgeblasen und somit die Voraussetzungen für die optimale Öl-Pflege geschaffen.

Um jedoch auch Proteine sicher aus dem Innern der Instrumente zu entfernen, ist eine vorherige Intensiv-Reinigung mit KaVo CLEAN- und DRYSpray erforderlich. Die Schnelligkeit des KaVo QUATTROcare PLUS entlastet nicht nur Ihren Praxisablauf, sondern gibt Ihnen auch die Sicherheit der perfekten Pflege. Die Lebensdauer Ihrer Instrumente wird es Ihnen danken.

Durch die Einzelplatz-Dosierautomatik wird sichergestellt, dass jedes Instrument mit der für seine Bauart erforderlichen Öl-Menge gepflegt wird. Dadurch wird unnötiger Verbrauch an Pflegeöl vermieden und die optimalen Laufeigenschaften der Instrumente sichergestellt. KaVo QUATTROcare PLUS ist universell. Das heißt: Sie können sowohl Ihre hochqualitativen KaVo Instrumente mit KaVo QUATTROcare PLUS pflegen, als auch Instrumente aller gängigen Hersteller.

## Konsequent effizient in der Pflege.

Langlebigkeit ist nicht allein eine Frage der Produktqualität, sondern auch der darauf abgestimmten Pflege. KaVo hat mit dem KaVo QUATTROcare-Pflegesystem einen weltweiten Maßstab in der Effizienz der Instrumenten-Pflege gesetzt. Das innovative KaVo QUATTROcare PLUS-Pflegesystem ist unvergleichlich gründlich, wirtschaftlich und einfach zu bedienen. Perfekt für alle Ihre Instrumente, die täglich im Praxiseinsatz sind.

KaVo QUATTROcare PLUS ist standardmäßig mit der innovativen Purgung-Funktion ausgestattet. Hierbei werden die Getriebe- und Spraykanäle zusätzlich mit Druckluft beaufschlagt und durchgeblasen, so dass evtl. überschüssige letzte Ölreste verschwinden und die KaVo Instrumente bis ins kleinste Detail gepflegt sind.

## Integriertes Spannzangen-Pflegeprogramm.

Die einmal wöchentliche Reinigung und Pflege der Spannzangen Ihrer Instrumente sichert deren Haltekraft, Funktionssicherheit und lange Lebensdauer

1. Spannzangen-Pflegeadapter auf MULTIflex-Kupplung aufstecken
2. Spannzange auf Pflegeadapter aufsetzen
3. Programmtaste Spannzange drücken



*Der KaVo QUATTROcare Effekt. Kraftvolle Expansion des KaVo QUATTROcare plus-Pflegesprays im Innern der Instrumente löst und entfernt organische Rückstände.*

*Effizienz in der Praxis. KaVo SU-PERtorque LUX 650 B, gepflegt mit KaVo QUATTROcare-Pflegesystem. Sieben Jahre im täglichen Praxiseinsatz ohne Ausfall oder Austausch des Läufers. Immer optimal gepflegt – immer betriebsbereit.*



**EXZELLENT.**

## Pflege und Effizienz – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Optimale Pflege durch KaVo QUATTROcare plus-Pflegespray
- Hohe Effizienz durch perfekte Abstimmung auf tägliche Praxisanforderungen

**KaVo QUATTROcare PLUS:**  
optimal gepflegt – hocheffizient.



# Günstig in der Anschaffung. Sparsam im Verbrauch.



## Die Vorteile liegen auf der Hand.

Sie legen Wert auf Instrumente in Spitzenqualität. KaVo QUATTROcare PLUS sorgt dafür, dass Ihre Instrumente nichts an Präzision und Wert verlieren. Denn nur mit perfekt gepflegten und anschließend hygienisch wiederaufbereiteten Instrumenten lassen sich Kosten dauerhaft sparen und perfekte Ergebnisse erzielen.

Die Einzelplatz-Dosierautomatik und die Belegungserkennung der Pflegeplätze des KaVo QUATTROcare PLUS garantieren die exakt notwendige Dosierung des KaVo QUATTROcare plus Pflegespray. Überschüssiger Verbrauch und damit unnötige Kosten können nicht entstehen.

## Kostengünstige Pflege – Höhepunkte und Vorteile für Sie:

- Nur eine Minute Pflegezyklus für vier Instrumente
- Programmgesteuerter, automatischer Pflegeablauf
- Optimale Öl-Pflege durch Einzelplatz-Dosierautomatik
- Einfache Handhabung verhindert Pflegefehler
- Ausblasen der Getriebe- und Spraykanäle durch Purging-Funktion
- Kein Austritt von Restöl nach der Pflege
- Basisbestückung mit vier Pflegekupplungen (1 x MULTIflex / 3 x INTRAMatic)
- Universelle Verwendbarkeit (Adapter für alle gängigen Fabrikate lieferbar)
- Modernes und ergonomisches Design

**KaVo QUATTROcare PLUS:**  
einfach – universell – sparsam.

REINIGUNG  
+  
PFLEGE  
=



# Technische Daten

## Abmessungen:


Breite	35 cm
Tiefe	28 cm
Höhe	38 cm

## Technische Details:

Gewicht	10 kg
Netzspannung	100 – 240 V
Netzfrequenz	50 – 60 Hz
Leistungsaugnahme	ca. 24 W
Druckluftanschluss	4 – 6 bar
Druckluftverbrauch	ca. 50 NI/min

## Aufstellbedingungen:

- Gute Raumbelüftung
- keine direkte Sonneneinstrahlung

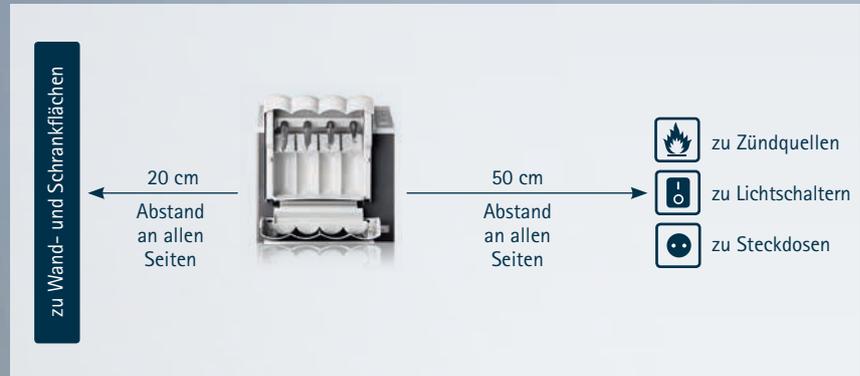

# Zubehör

Produkt	Mat.-Nr.	Produkt	Mat.-Nr.
Pflegekupplung INTRAmatic	1.009.6143	Pflegekupplung YOSHIDA Turbinen mit Licht	1.000.7403
Pflegekupplung MULTIflex	1.009.6142	Pflegekupplung YOSHIDA Turbinen ohne Licht	1.000.7585
Pflegekupplung Köpfe	0.411.7941	Pflegekupplung MIDWEST Low Speed	1.000.8459
Pflegekupplung COMFORTdrive	1.005.1707	Pflegekupplung NSK Turbinen	1.000.8786
Pflegeadapter SIRONA TE Instrumente	1.000.1003	Pflegekupplung OSADA Turbinen	1.000.8858
Pflegekupplung SIRONA T1 Turbinen	1.000.7156	Pflegekupplung Borden 2-Loch	1.002.1217
Pflegekupplung BIEN-AIR	1.001.7860	Pflegekupplung MORITA Turbinen	1.000.6063
Pflegekupplung W&H	1.001.7888	QUATTROcare Plus Spray (Pck. mit 6 Dosen)	1.005.4525
		Spannzangen-Pflegeset	1.003.1253



KaVo. Dental Excellence.